

FIXTER

STERNAL KAPATMA PLAĞI

ÜRÜN KODU	EBAT	Etiket ADI	KULLANIM ARALIĞI
SCS 2012	20x12mm	20x12mm Sternum Kapatma Sistemi	20-25mm
SCS 2512	25x12mm	25x12mm Sternum Kapatma Sistemi	25-30mm
SCS 3012	30x12mm	30x12mm Sternum Kapatma Sistemi	30-35mm
SCS 3512	35x12mm	35x12mm Sternum Kapatma Sistemi	35-40mm
SCS 4012	40x12mm	40x12mm Sternum Kapatma Sistemi	40-45mm
SCS 4512	45x12mm	45x12mm Sternum Kapatma Sistemi	45-50mm
SCS 5012	50x12mm	50x12mm Sternum Kapatma Sistemi	50-55mm



KARDİYOTORASİK
VE VASKÜLER CERRAHİ
İÇİN BİR YENİLİK



YAYLA-MED®
www.yaylamed.com.tr


Yayla-Med Tıbbi Cihazlar Medikal Ürünler Tic. Ltd. Şti.
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No:47 K:4 D:410 Bayraklı / İzmir / Türkiye Zip Code: 35535

Tel: +90 232 339 88 98
www.yaylamed.com.tr

Fax: +90 232 339 88 97
info@yaylamed.com.tr

FIXTER

STERNAL KAPATMA PLAĞI

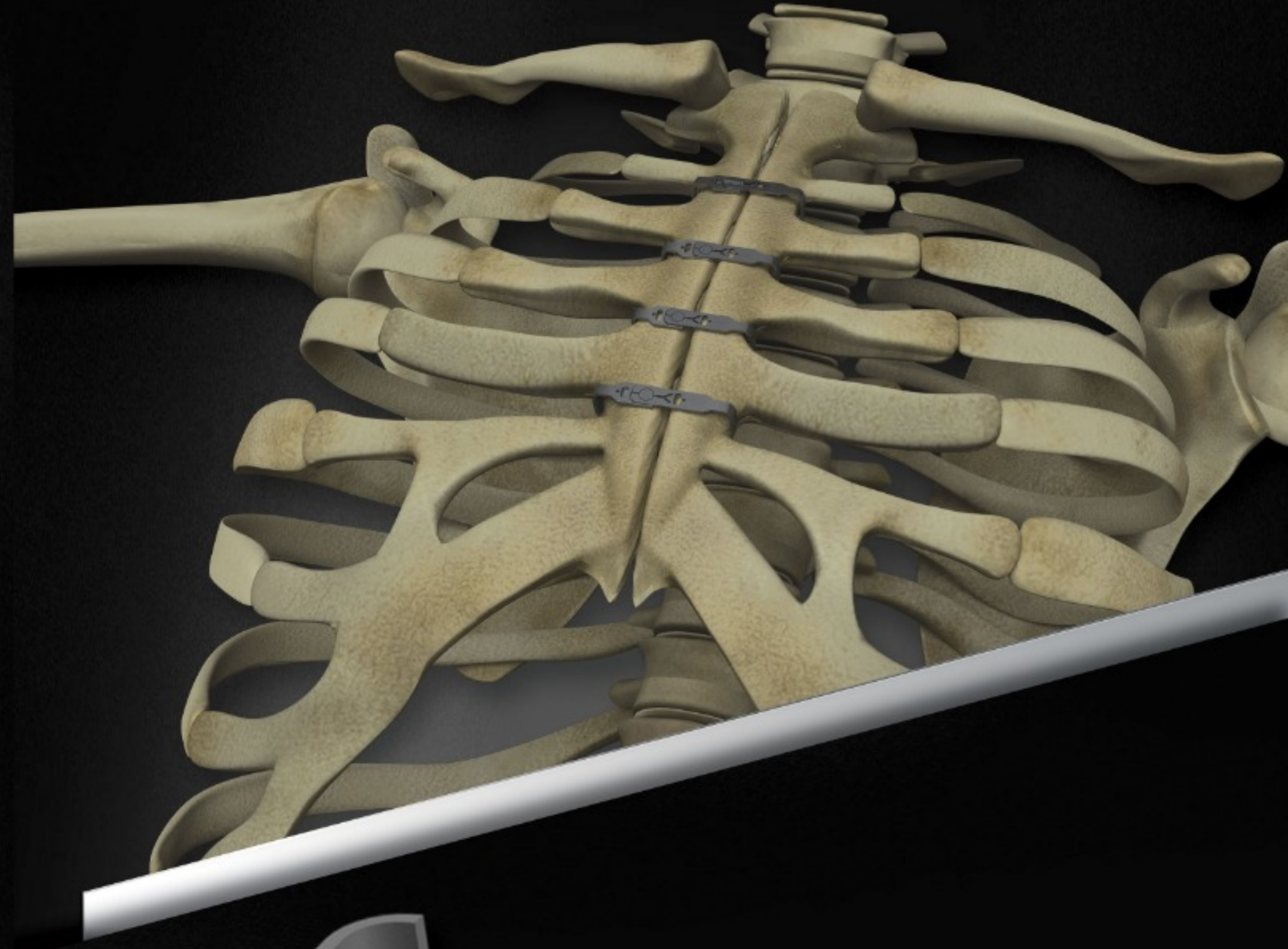

KARDİYOTORASİK
VE VASKÜLER CERRAHİ
İÇİN BİR YENİLİK

YAYLA-MED®

KARDİYOTORASİK VE VASKÜLER CERRAHİ İÇİN BİR YENİLİK

Sternumu güvenli ve güvenli bir şekilde kapatmanızı sağlayan **FIXTER** ürünü ile bölünmüş sternumun iki yarısı rijit fiksasyon için biraraya getirilirken aynı zamanda kemik penetrasyonu önlenir. Sistemin özel tasarımı, sternumun bağlantı noktaları üzerindeki söz konusu kuvvetlerin, özellikle yüksek riskli hastalarda bütün kemik yüzeyine dağıtılmasını sağlar. Devrim niteliğindeki **FIXTER** biyo-uyumlu titanyumdan yapılmıştır. İmplantasyonu kolaydır ve operasyondan hemen sonra acil bir durumda hızlı ve kolay bir şekilde geri açılabilir. **FIXTER** tasarımı ile bir yandan cerrahın çalışmasını büyük ölçüde kolaylaştırırken, diğer taraftan hastaların yaşam kalitesini artırır.

Müdahaleden hemen sonra yük altında stabil bir sternal kapama, daha az komplikasyon ve genellikle normal yaşama daha hızlı geri dönüş gibi faydalar herhangi bir hasta için yaşam kalitesinde gerçek bir artıya dönüşür.

KOLAY UYGULAMA VE HASTA DOSTU



FIXTER bir temel versiyonda mevcuttur. **FIXTER**, sternumu kapatmak için basitçe itilmiş iki parçadan oluşur. İntraoperatif yerleştirme sadece üç basit adımı içerir. Böylece sternum hızlı ve komplike olmayan bir süreçte güvenli bir şekilde kapatılabilir.




SADECE BİR DÖNÜŞ HAREKETİ İLE İMPLATLARIN AÇILMASI VE KAPATILMASI

Özel bir mandal mekanizması, **FIXTER** implantlarının kolaylıkla açılmasını ve kapatılmasını sağlar. İmplantın arkasındaki iki konumlu vidanın konumuna bağlı olarak, mekanizma ekstra kontrol olmaksızın devreye girer veya kilidini açar.

YÜKSEK
RİSKLİ
HASTALAR
İÇİN
YÜKSEK
GÜVENLİK

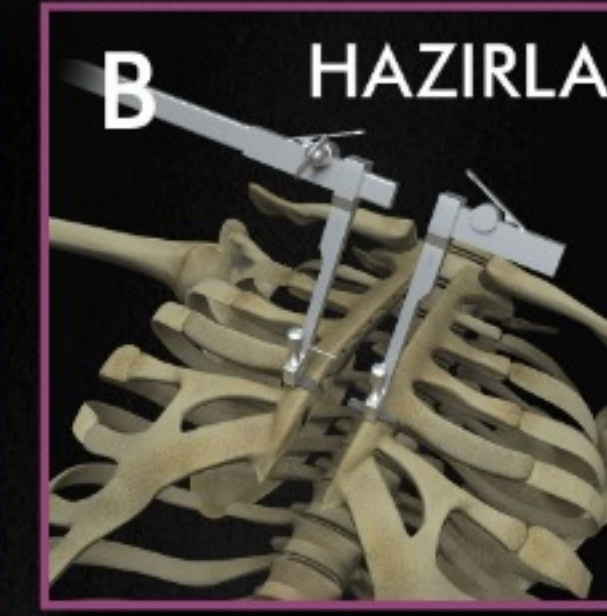
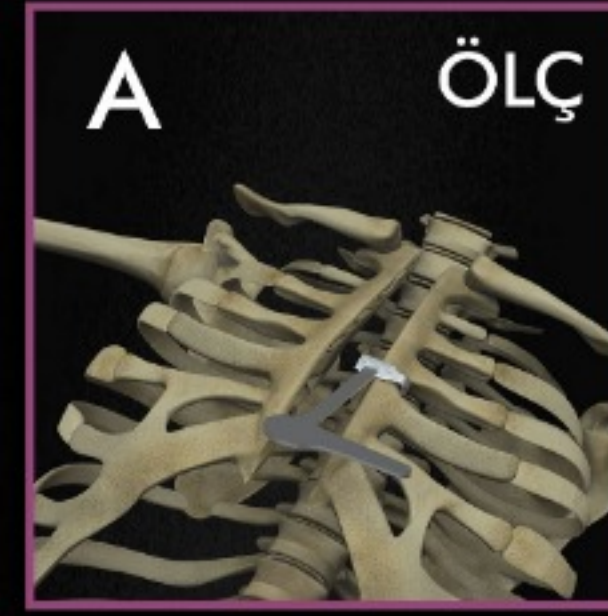


Sternumun genişliği seçilecek implantın doğru boyutunu belirlemek için tam olarak ölçülür.

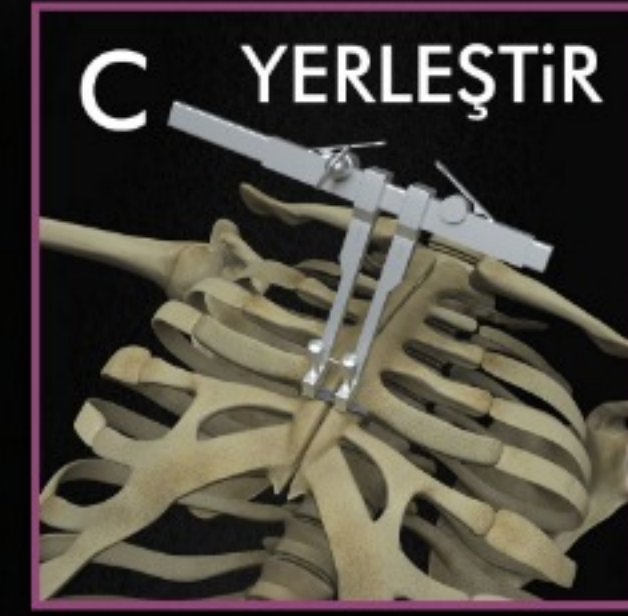

FIXTER'in iki pozisyonlu vidası kapanış pozisyonuna çevrilir. Mandal mekanizmasını çalıştırır. İki yarıya birlikte basmak için bir daraltma kelepçesi kullanılır.

İmplant sıkı bir şekilde kapatıldıktan sonra, iki pozisyonlu vida kilitli konuma çevrilir. Bu, implantı güvenli bir şekilde kilitlet.

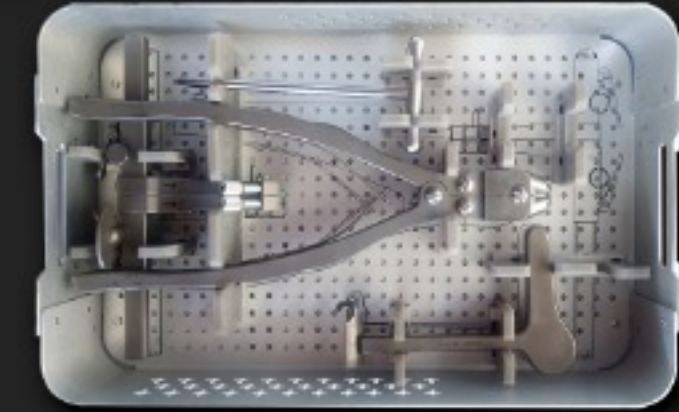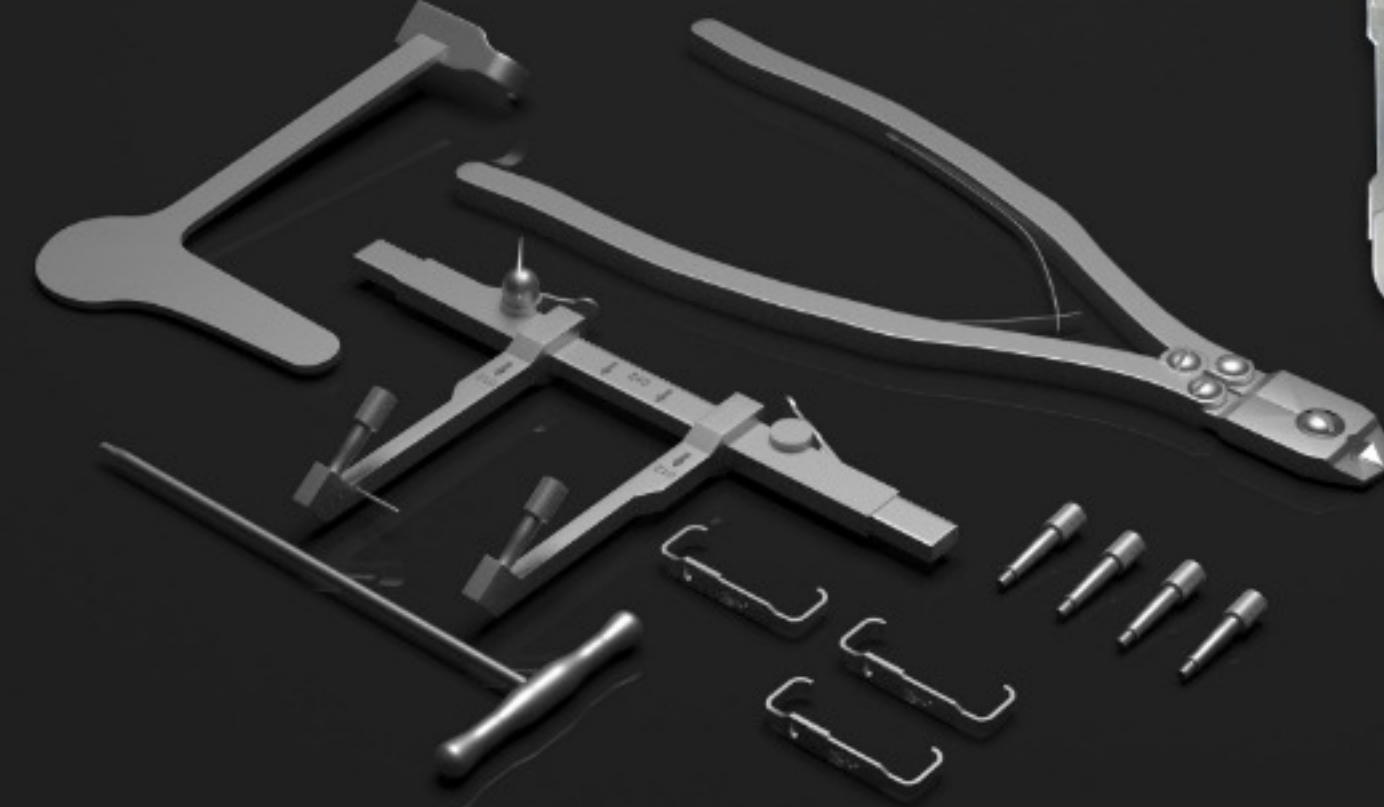

Sternal Kapatma Cihazı	2 Ad
Slot Başlı Tornavida	1 Ad
Plaka Kesim Kelepçesi	1 Ad
Alet Kutusu	1 Ad

FIXTER
STERNAL KAPATMA PLAĞI